

ង្រៃសួខសុខាឌិបាល

នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ

ការិយាល័យសេវាមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ

សៀវភៅណែជាំសម្រាប់ការប្រើច្រាស់កម្មវិជី ប្រព័ន្ធនិត្នជ័យមន្ទីរពិសោជន៍ជៅកម្ពុជា

Cambodia Laboratory

កញ្ញា ២០១៧

មាតិកា

ව)	សេចក្តីផ្តើម			9
	9.9	ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ?	9	
	ඉ.ල	រប្បេបប្រើប្រាស់ស្បេវភៅ		9
್ರಾ)	រប្បេបច្រើឲ្យ			ണ
	_	ការចូលកម្មវិធី		ડ
	ଟ.ଟ	ការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់		៥
		ការចាកចេញពីកម្មវិធី		ले
ണ)	ទិន្នន័យអ្នក	รู รี		ದ
	ണ.୭	ការបញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកជំងឺ		៥
	ണാം	ការស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកជំងឺ		90
	ണ.ണ	ការលុបទិន្នន័យអ្នកជំងឺ	99	
(ی	ទិន្នន័យវត្ថុវិរ	নাঙ্গ		ഉ
	৫.୭	ការបញ្ហាលទិន្នន័យសំណាកថ្មី		ಶ್ರಿ
	<i>હ</i> .ઇ	ការដាក់បញ្ហាលតេស្ត		ഉണ
	ൂ.ബ	ការស្វែងរក និង កែប្រៃសំណាក		ઇဇ
	బ .ప	ការលុបសំណាក		र्टल
	ა .ა	ការបដិសេធសំណាក		୭ମ
೮)	លទ្ធផល			೨ದ
	೮. ೨	ការបញ្ហាលលទ្ធផល		
	ජ.ව	ការបញ្ហាលលទ្ធផលបាក់តេវី		೦ಅ
	୪ .m	ការបញ្ចេញលទ្ធផល		೯೯
(ર્	រប្វាយការណ៍	ń		യ
	ট. ୭	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍តាមអ្នកជំងឺ		ಲ್
	ಆ. ರ	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍បា្កក់តេវីសាស្ត្រ	ച്ച	
	უ .თ	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍សរុប		ઇહ
	ઇ.ઇ	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍សរុបតាមផ្នៃក		ઇહ
	১. ধ	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍សរុបតាមផ្នៃក		ಶಿಲ್
	ל.ל	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍សរុបតាមផ្នៃក		ಶಿಟ
	ි.ෆ්	ការបង្កើតរប្វាយការណ៍សរុបតាមផ្ទៃក		र्टल

១) សេចក្តីផ្តើម

១.១ ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង?

មន្ទីរពិសោធន៍ គឺកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើការវិភាគរកលទ្ធផលពិសោធន៍ទៅលើសំណាករបស់ អ្នកជំងឺយ៉ាងជាក់លាក់មួយ ដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើពាគវិនិច្ឆ័យ និងផ្ដល់ការតាមដានក៏ដូច ជា ការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវ និង ទាន់ពេលវេលា។ ព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយ និង បង្ការការ ប្រឈមមុខ ទៅនឹងជំងឺនានាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ។ យ៉ាងណាមិញ ការគ្រប់គ្រង ការរក្សា ទុក និង ការវិភាគព័ត៌មានទាំងអស់នេះ គឺជារឿងសំខាន់មួយដែលគ្រប់មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ត្រូវធ្វើ។ កន្លង មកព័ត៌មានទាំងអស់នោះ ត្រូវបានរក្សាទុកទៅតាមរបៀបរបស់មន្ទីរពិសោធន៍និមួយៗ ដែលមិនមានភាព ពេញលេញ និង គ្មានលក្ខណៈស្ដង់ដា។ បញ្ហានេះបានផ្ដល់ការលំបាកដល់ ក្រុមគ្រូពេទ្យ ឬ អ្នកជំនាញខាង សុខភាពផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ហេតុដូចនេះហើយ នៅដើមឆ្នាំ ២០១២ ដោយមានការសហការណ៍ និង ផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេស ពី អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍ នៅ កម្ពុជានេះឡើងដែលមានឈ្មោះថា "CamLIS (Cambodia Laboratory Information System)"។ កម្មវិធី នេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ ទាំងអស់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្ដពិសោធន៍ របស់ខ្លួន ក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការ។ ដូចគ្នានេះដែរទិន្នន័យរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ និមួយៗ នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរួមមួយតាមរយៈអ៊ីនធឺណែត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក សំខាន់ៗ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការវិភាគ និង តាមដានទិន្នន័យទាំងអស់នោះបាន។ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ CamLIS នេះត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺនៅ ក្នុងមន្ទីរ ពេទ្យ Patient Management Registration System (PMRS) ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការ University Research Co. (URC)។

១.២ រប្បើបម្រើប្រាស់ស្យេវភៅ


សៀវភៅណែនាំការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិនន្ន័យមន្ទីរពិសោធន៍ នឹងរៀបរាប់អំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រង ព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍ដោយបង្ហាញនូវដំណើរការ និង សមាសភាពទាំងឡាយនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរ ពិសោធន៍អេឡិចត្រូនិចទាំងមូល ដែលប្រើប្រាស់នៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មុខងារ និង សកម្មភាព ខាងក្រោមអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រព័ន្ធទាំងមូល មានដូចជ៖

- 🗸 ចុះឈ្មោះ 🧼 ស្វែងរកឬ បញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកជំងឺ
- ✓ ដាក់បញ្ចូល ស្វែងរកនិង កែំប្រព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសំណាក
- 🗸 បញ្ចូល ស្វែងរកនិង ផ្ទៀងផ្ទាត់ លទ្ធផលវិភាគ

- 🗸 បញ្ចេញរបាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺ និង របាយការណ៍សរុប
- 🗸 ការស្រង់យកទិន្នន័យដោយផ្អែកលើការកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌ
- ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទាក់ទងនឹង ប៉ារ៉ាមែត្ររបស់ប្រព័ន្ធ សំណាក តេស្ត លទ្ធផលដែលអាចមាន អង់
 ទីប៊ីយ៉ូក្រាម និង អ្នកប្រើប្រាស់។

ಶಿಸಿಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕ್ಕಾಗಿಕ್ಕೆ (ಆ

ផ្នែកនេះមានបំណងណែនាំឲ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ប្រើប្រាស់កម្មវិធី CamLIS ក្នុងការគ្រប់គ្រង ព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍ ដោយចាប់ផ្ដើមពីការងារមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

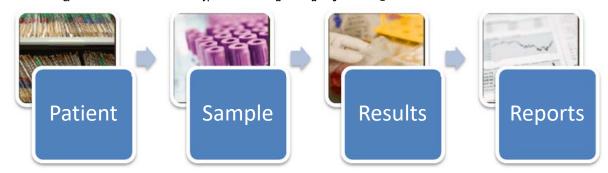

សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលមានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PMRS: ជាដំបូងអ្នកត្រូវ **ទាញយកទិន្នន័យអ្នក ជំងឺពី** ប្រព័ន្ធ PMRS ដែលបានបញ្ចូលរួច ពីកន្លែងពិគ្រោះជំងឺក្រៅដោយប្រើប្រាស់លេខកូដអ្នកជំងឺ។

សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលមិនមានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PMRS: បុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ ត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យ អ្នកជំងឺដោយខ្លួនឯង។

បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលទាក់ទង**សំណាក** រួចជ្រើសរើសប្រភេទតេស្តដែលបានស្នើ ដោយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការវិភាគ។ បន្ទាប់ពីបានលទ្ធផលវិភាគរួច បុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ចាប់ផ្តើមបញ្ចូល **លទ្ធ ផល** ទាំងនោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធ CamLIS រួចចាប់ផ្តើមបោះពុម្ភលទ្ធផលទាំងនោះសម្រាប់ប្រគល់ទៅឲ្យគ្រូពេទ្ យ។ ក្នុងករណីនេះ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលលទ្ធផលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញដោយបុគ្គលិក ឬ អ្នក គ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ ជៀសវៀងការមានកំហុសណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារមនុស្ស ឬ ដោយ កំហុសម៉ាស៊ីន។

ចុងបញ្ចប់ សម្រាប់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងត្រូវផ្តល់នូវទិន្ន័យក្នុងទំរង់មួយដែលអាច សម្រួលដល់ ការសម្រេចចិត្តនេះ។ ផ្នែក **របាយការណ៍** នឹងបង្ហាញអំពីទំរង់ផ្សេងៗគ្នាដែលមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ CamLIS។

ចំនុចដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៅពេលប្រើប្រាស់ CamLIS:

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនឹងមិនអាចឆ្ពោះទៅកាន់ចំនុចបន្ទាប់បានទេ ប្រសិនបើពួកគេមិនបានបំពេញព័ត៌មានដែលចាំបាច់ មួយចំនួននោះ។ CamLIS បានកំណត់ថា ព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវតែបញ្ចូលជាដាច់ខាតសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលដំណើរការ បាន។ ព័ត៌មានទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយដាក់សញ្ញា **ផ្កាយ (*)** នៅខាងក្រោយប្រអប់បញ្ចូលទិន្នន័យនិមួយៗ។

២.១ ការចូលកម្មវិធី

ដើម្បីចូលកម្មវិធី CamLIS web based អ្នកត្រូវការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត និង កម្មវិធីសម្រាប់បើក គេហ ទំព័រមួយ (Browser) ដែលមានដូច Firefox ឬ Chrome។ បន្ទាប់មក សូមវាយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋាន www.camlis.pmrscambodia.org សម្រាប់បើកកម្មវិធី CamLIS web based។ ប្រសិនបើអាស័យដ្ឋាន ត្រឹមត្រូវ វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងអេក្រង់ដូចខាងក្រោម សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលឈ្មោះ និង លេខសម្ងាត់ ដើម្បី ចូលប្រើកម្មវិធី។



សូមបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង លេខសម្ងាត់ ដែលបានបង្កើត និង ផ្តល់ឲ្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រង រួចចុចលើប៊ូតុង "**ចូលប្រើប្រាស់**"។ ប្រសិនបើឈ្មោះ ឬ លេខសម្ងាត់ដែលអ្នកបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវ នោះវានឹង

បង្ហាញសារមួយដោយបញ្ជាក់ថា "ឈ្មោះអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬ លេខសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវទេ″ រួច អនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចូលសារជាថ្មីម្តងទៀត(រូប ខាងស្តាំ)។

ផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើការបញ្ចូល ព័ត៌មានរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ វានឹងបង្ហាញនូវ ផ្ទាំងអេក្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ធ្វើការងារបន្តបន្ទាប់ទៀតបាន (រូបខាង ក្រោម)។







២.២ ការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ (សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍)

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង លេខសម្ងាត់ត្រូវបានបង្កើត និង កំណត់ឲ្យជាស្រេចដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នីមួយៗ។ អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬ ដោយអ្នក គ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ។


- 9- ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ដោយខ្លួនឯងសូមធ្វើដូចខាងក្រោម (អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចាំលេខសម្ងាត់ចាស់)៖
 - ចុចលើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនៅខាងលើ ខាង <mark>លោកអ្នកគឺ who camlis (ចាកចេញ 🏵)</mark> ស្តាំអេក្រង់។
 - ផ្ទាំងអេក្រង់មួយទៀតនឹងលេចចេញមក អនុញ្ញាតិ ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស់នូវព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងលេខសម្ងាត់

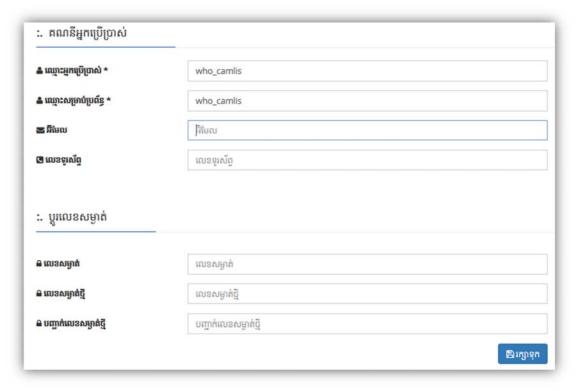

- សូមធ្វើការបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ចាស់ម្តង រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មីពីរដឹងដើម្បីបញ្ជាក់។ រួចសូម ចុចរក្សាទុកដើម្បីបញ្ចប់។
- ២- ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងសូមធ្វើដូចខាងក្រោម (មិនចាំបាច់ចាំលេខសម្ងាត់ចាស់)៖
 - ចុចលើម៉ឺនុយ **គ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍**" រួចចុចលើបញ្ជីរ **អ្នកប្រើប្រាស់**" ដែលនៅខាងឆ្វេងដៃ ខាងក្រោម។

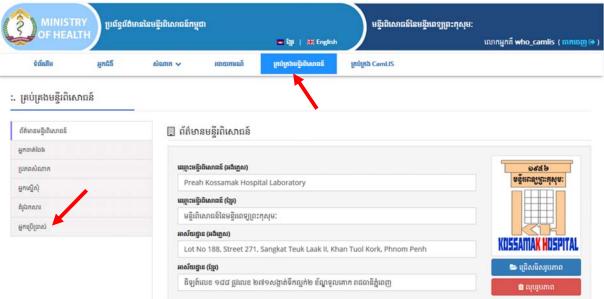


- បន្ទាប់មកផ្ទាំងអេក្រង់មួយទៀតនឹងបើកឡើង ដែលបង្ហាញនូវឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែល មាននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។
- ចុចលើសញ្ញា ដែលនៅជួរជាមួយនិងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីទៅកាន់កន្លែងផ្លាស់ ប្តូរលេខសម្ងាត់។

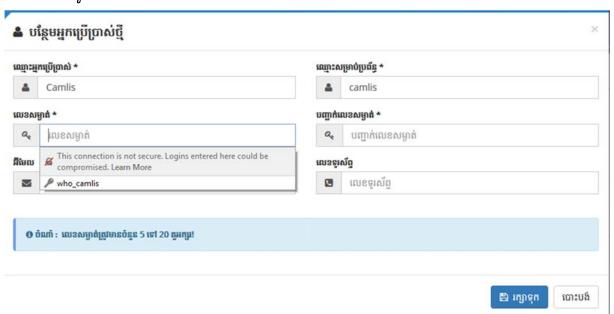

- ត្រូវបញ្ចូល លេខសម្ងាត់ថ្មីទៅក្នុងប្រអប់ **លេខសម្ងាត់** និង **បញ្ជាក់លេខសម្ងាត់** រួចចុចលើប៊ូ តុង រក្សាទុកជាការស្រេច។

២.៣ ការចាកចេញពីកម្មវិធី

ជាធម្មតាការចាកចេញពីកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនីមួយៗមិនមានការ លំបាកនោះទេ។ ដូចគ្នា ដែរចំពោះកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច លើពាក្យថា "ចាកចេញ" ជាការស្រេច។ ការងារផ្សេងៗនឹងត្រូវបិទ រួច អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី បាន។ សូមចុចលើចំនុច ខ្វែងខាងលើគេ ផ្នែកខាងស្ដាំដើម្បីបិទកម្ម វិធីទាំងមូល។

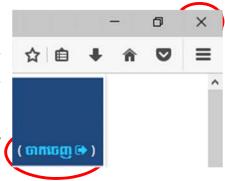

សំគាល់:

- អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីត្រូវតែទៅស្នើសុំអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតឈ្មោះ និង លេខសម្ងាត់ របស់ពួកគេផ្ទាល់។
- គួរជៀសរៀងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ ឬ លេខសម្ងាត់អ្នកដទៃក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។
- សូមប្រយ័ត្នចំពោះលក្ខណៈអក្សរដែលប្រើសម្រាប់លេខសម្ងាត់ដែលមានភាព ខុសគ្នារវាងអក្សរតូច និង អក្សរធំ។ ឧ.

 A ខុសពី a ។ ចំពោះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ មិនប្រកាន់លក្ខណៈរបស់អក្សរនោះទេ។

៣) ទិន្នន័យអ្នកជំងឺ

បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការចូលក្នុងកម្មវិធីបានជោគជ័យហើយ អ្នកប្រើប្រាស់អាចមានសិទ្ធិធ្វើ ការងារបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី។ ផ្នែកនេះនឹងផ្តល់អំពីរបៀបបញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកជំងឺថ្មី និង កំណត់រកទិន្នន័យអ្នកជំងឺចេញពីប្រព័ន្ធ PMRS មុននឹងភ្ជាប់អ្នកជំងឺទាំងនោះទៅកាន់សំណាកដែលបានស្នើ សុំសម្រាប់ពួកគាត់។ ជាមួយគ្នានេះដែរវានឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ចូលទិន្នន័យដែលចាំបាច់ របស់អ្នកជំងឺ មុន នឹងរក្សាទុកវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

៣.១ ការបញ្ហាលទិន្នន័យអ្នកជំងឺ

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកជំងឺ អ្នកត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖ ១-ចុចលើ Menu "សំណាក" រួចចុចជ្រើសរើស "បញ្ចូលសំណាកថ្មី" ។



> សម្រាប់ CamLIS ដែលភ្ជាប់ជាមួយ PMRS

- ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលលេខកូដអ្នកជំងឺ ទៅក្នុងប្រអប់លេខសម្គាល់អ្នកជំងឺ រួចចុចស្វែងរក

<mark>ស្វែងរកតាមលេខសម្គាល់អ្នកជិងី</mark> 002-011-999-9 ស្វែងរ**ក Q**

- ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរកមិនឃើញអ្នកជំងឺដែលមានលេខកូដដូវដែលបានបញ្ចូលទេ វានឹងបង្ហាញនូវ សារមួយថា <u>គ្មានលទ្ធផល</u>។
- ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរកឃើញអ្នកជំងឺដែលមានលេខកូដដូចដែលបានបញ្ចូល វានឹងបង្ហាញនូវផ្ទាំង អេក្រង់មួយទៀត ដែលបង្ហាញព័ត៌មានអ្នកជំងឺ និង អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ចាប់ផ្តើមបញ្ចូល ទិន្នន័យសំណាកបន្តទៀត (សូមមើលរូបភាពបន្ទាប់)។



សម្រាប់ CamLIS ដែលមិនបានភ្ជាប់ជាមួយ PMRS


- ចុចលើប៊ូតុង • បញ្ចូលអ្នកជំងឺដូចខាង ក្រោម៖



- + ឈ្មោះអ្នកជំងឺ៖ ឈ្មោះ ឬ ក៏អក្សរកាត់ផ្សេងៗដែលមាននៅលើទំរង់ស្នើសុំ
- + **ភេទ**៖ គឺជាភេទរបស់អ្នកជំងឺដែលមាន ប្រុស ឬ ស្រី
- + **ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត**៖ គឺជថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកជំងឺ។ អ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលវាទេប្រសិនបើគ្នា ន។ ពេលបញ្ចូលរួច អាយុអ្នកជំងឺនឹងត្រូវបានគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- + អាយុ៖ គឺជារយៈពេលដែលគិតចាប់ពីអ្នកជំងឺកើតរហូតមកដល់ពេលអ្នកជំងឺមក មន្ទីរ ពេទ្យ ពេលបញ្ចូលរួច ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ្នកជំងឺនឹងត្រូវបានគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- + **លេខទូរស័ព្ទ**៖ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជំងឺប្រសិនបើមាន
- + **អាស័យដ្ឋាន**៖ ដែលមានខេត្ត/ក្រុង ស្រុក/ខ័ណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់ ភូមិ
- ចុចលើប៊ូតុង **រក្សាទុក** ដើម្បីបញ្ជាក់ នឹង រក្សាទុកទិន្នន័យ
- ចុចលើប៊ូតុង "**បោះបង់**" ដើម្បីចាកចេញ

៣.២ ការស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកជំងឺ

ដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកជំងឺអ្នកត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមៈ ១-ចុចលើ Menu **អ្នកជំងឺ**"

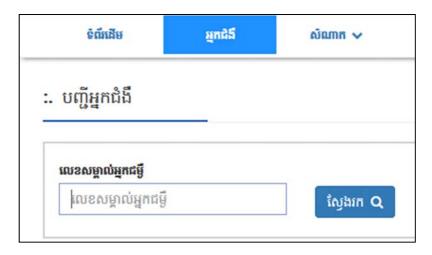


២-ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលលេខកូដអ្នកជំងឺ ទៅក្នុងប្រអប់លេខសម្គាល់អ្នកជំងឺ រួចចុច **់ស្វែងរក**។

ស្វែងរកតាមលេខសម្គាល់អ្នកជំងឺ 002-011-999-9 ស្វែងរក Q


៣-ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរកមិនឃើញអ្នកជំងឺដែលមានលេខកូដដូចដែលបានបញ្ចូលទេ វានឹងបង្ហាញនូវ សារមួយថា <u>គ្មានទិន្នន័យ</u>។

៤-បើសិនជាមានទិន្នន័យដែលត្រូវនឹងលេខកូដខាងលើត្រូវបានរកឃើញ នោះវានឹងបង្ហាញនូវតារាង ទិន្នន័យដែលរកឃើញទាំងនោះនៅខាងក្រោម។

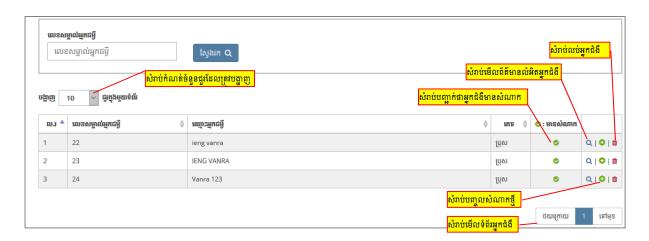

៣.៣ ការលុបទិន្នន័យអ្នកជំងឺ

ដើម្បីលុបទិន្នន័យអ្នកជំងឺសូមជ្រើសរើសអ្នកជំងឺដែលអ្នកចង់លុបបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង ធ្វាំងសារខាងក្រោម នឹងបង្ហាញឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើអ្នកពិតជាចង់ លុបទិន្នន័យនេះមែន ឬ មិនមែន?

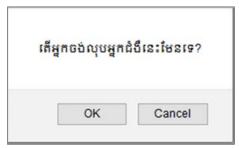

ប្រើសិនបើអ្នកពិតជាចង់លុបមែនសូមចុចលើ ប៊ូតុង OK ឬ ចុចប៊ូតុង Cancel ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ លុបវានោះទេ។

សំគាល់:

- ចំពោះកាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ត្រូវបញ្ចូលតាមលំដាប់ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ឬ ជ្រើសរើសដោយប្រើប្រតិទិន
- ប្រព័ន្ធនឹងកំណត់លេខសម្គាល់អ្នកជំងឺដែលបញ្ចូលថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
- អ្នកត្រូវមានសិទ្ធក្នុងការលប់ទិន្នន័យទើបអាចធ្វើការងារនេះបាន។
- ទិន្នន័យដែលបានលុបហើយមិនអាចទាញយកមកវិញបានទេ។ ដូចនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងធ្វើការលុបអ្វីមួយ។

៤) ទិន្នន័យវត្ថុវិភាគ


ផ្នែកនេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ចូលសំណាកថ្មី ការកែប្រែសំណាកចាស់ និង ការបញ្ចូលតេស្ត សម្រាប់អ្នកជំងឺនិមួយៗដែលបានស្នើសុំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតទៅក្នុងប្រព័ន្ធ CamLIS។

នៅមន្ទីរពិសោធន៍ ជាទូទៅសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកន្លែងទទួលពិគ្រោះជំងឺ ឬកន្លែង បូមឈាម ហើយមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍។ បើសិនជា សកម្មភាពនេះមិនត្រូវបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវទេ បុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍មិនអាចបញ្ចូលលទ្ធផលសម្រាប់ សំណាកបានទេ។ ជាផលអាក្រក់វេជ្ជបណ្ឌិតមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺ បាននោះទ។

៤.១ ការបញ្ហាលទិន្នន័យសំណាកថ្មី


ចំនុចនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសអ្នកជំងឺចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS ឬ បញ្ចូលអ្នកជំងឺថ្មី (មើលចំនុច ៣.១) ដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើតេស្តពីមុនមក ដើម្បីបញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនិងសំណាករបស់គា ត់។

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យសំណាកថ្មីសម្រាប់អ្នកជំងឺណាមួយអ្នកត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖ ១-សូមធ្វើដូចចំនុច ៣.១ ដើម្បីបញ្ចូលអ្នកជំងឺជាមុនសិន ២-ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលព័ត៌មានសំណាកថ្មីដែលមានដូចខាងក្រោម៖

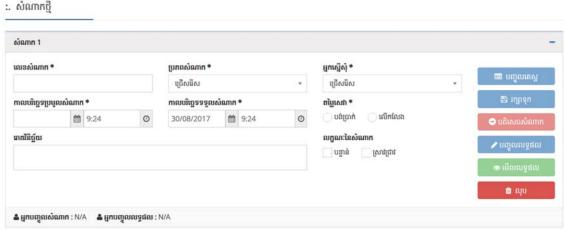

- លេខកូដសំណាក៖ ត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេចដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលមានទំរង់ (xxx-ddmmyyyy)។
- ប្រភព**ផ្តល់សំណាក**៖ ឈ្មោះសាល ឬ ផ្នែក ឬ ស្ថាប័ន ដែលបានបញ្ជូនវត្ថុវិភាគមក
- អ្នកស្នើសុំ៖ ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ ឬ អ្នកដែលបានស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍លើសំណាក

- **កាលបរិច្ឆេទប្រមូលសំណាក**៖ គឺជាកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលសំណាកត្រូវបានប្រមូល យកមកពីអ្នកជំងឺ
- **កាលបរិច្ឆេទទទួលសំណាក**៖ គឺជាកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលសំណាកត្រូវបានបញ្ហូនមក ដល់មន្ទីរពិសោធន៍។
- **បង់ប្រាក់**៖ សម្រាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ការពិសោធន៍
- លើកលែង៖ សម្រាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺត្រូវបានលើកលែងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការពិសោធន៍
- បន្ទាន់៖ ប្រើសម្រាប់សំណាកទាំងឡាយណាដែលត្រូវការលទ្ធផលបន្ទាន់
- ស្រាវជ្រាវ៖ សម្រាប់បញ្ជាក់ថាសំណាកដែលបានបញ្ជូនមកធ្វើតេស្តគឺ សម្រាប់បំរើឲ្យការស្រាវជ្រាវ អ្វីមួយ។
- **រោគវិនិច្ឆ័យ**៖ សម្រាប់កត់ត្រានូវរោគសញ្ញាផ្សេងៗ និង ប្រវត្តិគ្លីនិករបស់អ្នកជំងឺ ៣-ប៊ុតុងដែលត្រូវប្រើរួមមាន៖

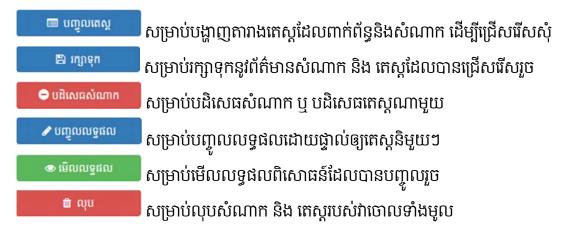


៤-នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលសំណាកបានមួយហើយ កម្មវិធីនឹងចេញកន្លែងមួយ ទៀតនៅខាងក្រោម សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលសំណាកមួយទៀត។

៤.២ ការដាក់បញ្ហាលតេស្ត

បន្ទាប់ពីបញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណាករួចហើយ អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចូលនូវ តេស្តទាំងឡាយ ណាដែលត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើពិសោធន៍សម្រាប់សំណាកនោះ។

១-សូមចុចលើប៊ូតុង ចាំប^{ា្លាប់តែស្ត} នៅត្រង់សំណាកដែលអ្នកចង់បញ្ចូលតេស្ត ២-តារាងតេស្ត ទាំងអស់ដែលរៀបតាមផ្នែកនិមួយៗ នឹងលេចចេញមកដើម្បីឲអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើស រើសប្រភេទតេស្តសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍ ដូចរូបខាងក្រោម៖

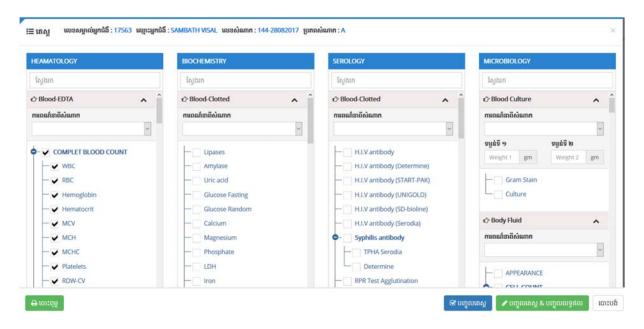

៣-សូមធ្វើការជ្រើសរើសតេស្តដែលអ្នកចង់ធ្វើរួចចុចលើប៊ូតុង **បញ្ចូលតេស្ត** ដើម្បីរក្សាទុក ៤-ប្រើសិនអ្នកចង់បញ្ចូលលទ្ធផលភ្លាមៗសម្រាប់តេស្តដែលបានជ្រើសរើសសូមចុចលើប៊ូតុង **បញ្ចូលតេស្ត & បញ្ចូលលទ្ធផល** ពេលនោះតារាងសម្រាប់បញ្ចូលលទ្ធផល របស់តេស្តនិមួយៗនឹង បង្ហាញឡើង។

៥-ប្រសិនអ្នកចង់បោះពុម្ភ តេស្តដែលបានជ្រើសរើសសូមចុចលើប៊ូតុង "**បោះពុម្ភ**" ៥-ដើម្បីចាកចេញដោយមិនកត់ត្រាទុក សូមចុចលើប៊ូតុង "**បោះបង់**"។

៤.៣ ការស្វែងរក និង កែប្រៃសំណាក

នៅត្រង់ចំនុចនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការបញ្ចូលបន្ថែមនូវសំណាក ឬ ធ្វើការកែប្រែសំណាក និង តេស្ត របស់អ្នកជំងឺដែលធ្លាប់មកធ្វើពិសោធន៍ម្តងរួចមកហើយ។


ដើម្បីធ្វើការងារនេះសូមធ្វើដូចតទៅ៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"សំណាក**" រួចចុចលើប៊ូតុង "**សំណាកបញ្ចូលរួច**"



២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ហើយបង្ហាញនូវតារាងរបស់អ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលបាន បញ្ចូលសំណាកពីមុនមកឲ្យយើងឃើញ ។ ៣-តារាងត្រូវបានបែងចែកជាពីរ៖

- ក- តារាងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលស្នើសុំធ្វើតេស្តបន្ទាន់
- ខ- តារាងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលស្នើសុំធ្វើតេស្តុតាមធម្មតា

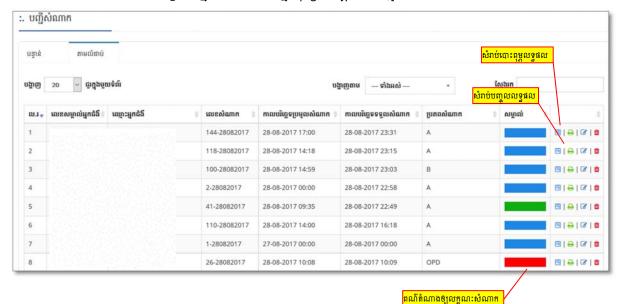

ពណ៌តំណាងស្ថានភាពរបស់សំណាក៖

៤-អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកទំព័រម្ដងមួយៗដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំងឺដែលមានដូចជា៖

- **ថយក្រោយ**៖ សម្រាប់មើលអ្នកជំងឺដែលនៅមុខគេបំផុត
- **លេខរៀងទំព័រ [1]៖** សម្រាប់មើលទៅតាមទំព័រនិមួយៗ
- **ទៅមុខ៖** សម្រាប់មើលអ្នកជំងឺដែលចុះឈ្មោះក្រោយគេបង្អស់
- អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅក្នុងប្រអប់ **ស្វែងរក** ដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំងឺ ដែលមានដូចជា៖ **លេខសម្គាល់អ្នកជំងឺ ឈ្មោះអ្នកជំងឺ លេខសំណាក** ។ល។

៥-បន្ទាប់ពីឃើញអ្នកជំងឺដែលយើងចង់បន្ថែម ឬ កែប្រែសំណាករួចហើយចុចលើប៊ូតុង ច្រាប់ ខេក្ស ខេត្ត ខេក្ស ខេត្ត ខេត ខេត្ត ខេត





m 12:38

01/07/2017

៤-ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បញ្ចូលសំណាកន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានជ្រើសរើសនេះ សូមចុចលើប៊ូតុង

+បញ្ចូលសំណាក្មី បញ្ចូលព័ត៌មានសំណាកថ្មីទៅក្នុងប្រអប់បញ្ចូលទិន្នន័យ (មើលចំនុច ៤.១) ។

៤.៤ ការលុបសំណាក

m 12:00

📤 អ្នកបញ្ចូលសំណាក : 🛍 សុខន 🐧 ថ្ងៃទី : 2017-07-01 12-38-57 🚨 កែប្រែដោយ : ស សុធ្លា


01/07/2017 មាតវិនិច្ឆ័យ

ការលុបសំណាក ក៏ដូចជាការលុបទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែរ គឺទាមទារឲ្យមានការ ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ពីព្រោះយើងមិនអាចយកវ៉ាមកវិញបានទេនៅពេលលុបហើយ។ រាល់ការលុបសំណាក តេស្តដែលភ្ជាប់ ជាមួយវ៉ាក៏នឹងត្រូវបានលុបដែរ។

ដើម្បីលុបសំណាកអ្នកគ្រាន់តែ៖

១-ធ្វើតាមរៀបដូចក្នុងចំនុច ៤.១ ចាប់ពីលេខរៀងទី ១ រហូតដល់ទី ៤ ។

២-បន្ទាប់ពីឃើញសំណាកដែលយើងចង់លុបហើយ សូមចុចលើប៊ូតុង សារសំរាប់បញ្ជាក់នឹងបង្ហាញមកដូចរូបខាងក្រោម៖

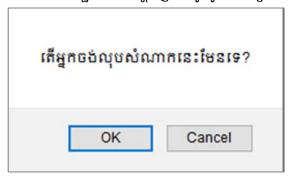


៣-សូមចុច OK ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដថាលុប ឬ ចុច Cancel ដើម្បីចាកចេញមកវិញ

🛍 លុប

៤.៥ ការបដិសេធសំណាក ឬ តេស្ត

បុគ្គលិកនៅកន្លែងទទួលសំណាក អាចមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការធ្វើតេស្តទៅលើសំណាក ទាំងមូល ឬ ទៅលើតេស្តណាមួយដែលបានស្នើសុំដោយគ្រូពេទ្យ ដោយផ្នែកលើភាពមិនសមស្របណាមួយ របស់សំណាក។

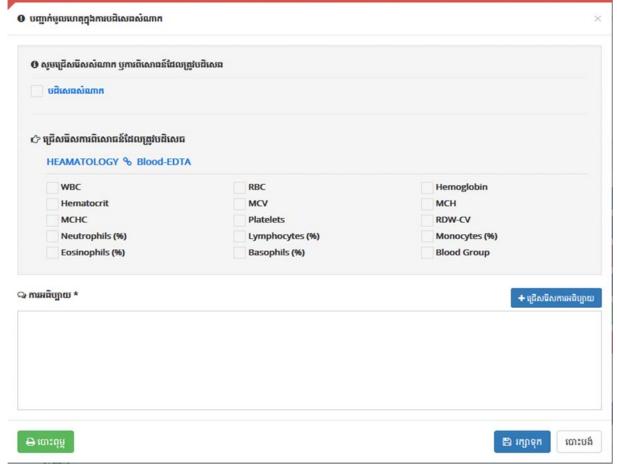

៥-ប្រើសិនបើអ្នកចង់បោះពុម្ភនូវតេស្តទាំងឡាយដែលបានបធិសេធសូមចុចលើប៊ូតុង **"បោះពុម្ភ**"។

សំគាល់ ៖

ចំពោះការបដិសេធ តេស្តនិមួយៗអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែតេស្តដែលបានស្នើសុំដោយគ្រូពេទ្យត្រូវបានបញ្ចូល


៥) លទ្ធផលពិសោធន៍

នៅពេលដែលអ្នកជំងឺ និង សំណាកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ យើងអាចចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលលទ្ធ ផលដែលបានធ្វើពិសោធន៍សម្រាប់សំណាកទាំងនោះ។ នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយ ដែលអ្នកបច្ចេកទេស មន្ទីរពិសោធន៍ មានមុខងារយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដំណើររបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។ អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ មានមុខងារក្នុងការបញ្ចូលនូវរាល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងលទ្ធផលទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺនិមួយៗ។ អ្នក គ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលលទ្ធផលនេះបានដែរ នៅមុនពេលផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រូពេទ្យ ឬ អ្នកជំងឺ។

៥.១ ការបញ្ហាលលទ្ធផល


ចំនុចនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសអ្នកជំងឺថ្មី ឬ លេខកូដសំណាករបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បី បញ្ចូលលទ្ធផលទាក់ទង និងតេស្តនៃសំណាករបស់គាត់។

ដើម្បីបញ្ចូលលទ្ធផលនៃសំណាកសម្រាប់អ្នកជំងឺណាមួយអ្នកត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖ ១-ធ្វើតាមរបៀបដូចក្នុងចំនុច ៤.១ ចាប់ពីលេខរៀងទី ១ រហូតដល់ទី ៤ ២-ចុចលើប៊ូតុង "បញ្ចូលលទ្ធផល (មើលរូបខាងក្រោម)។

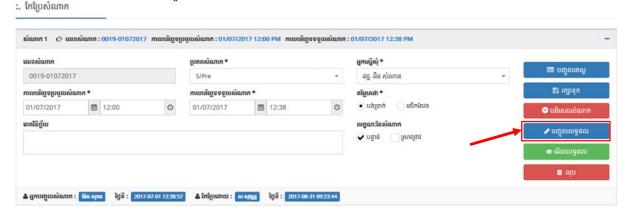

៣-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលលទ្ធផលអ្នកជំងឺទៅ តាមតេស្តដែលបានស្នើសុំ។

៤-សូមធ្វើការបញ្ចូលលទ្ធផលទៅតាមលំដាប់របស់ឈ្មោះតេស្ត ជៀសរៀងការច្រលំដោយប្រការ ណាមួយ។ ខ្នាត និង តំលៃយោងរបស់តេស្តនិមួយៗក៏បង្ហាញមកជាមួយផងដែរ ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ងាយស្រួលយល់។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺម្នាក់ មានតេស្តច្រើននោះសូមចុចសញ្ញានៅខាងស្តាំដៃ (scroll) ដើម្បីទាញទំព័រពីលើចុះក្រោម ឬ ត្រឡប់មកវិញ ។

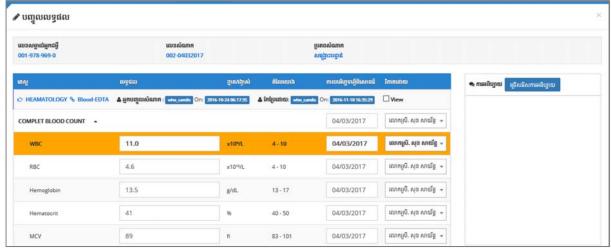

៥-ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវបញ្ចូលរួមមាន៖

- **លទ្ធផល៖** គឺជាលទ្ធផលបានមកពីឧបករណ៍ពិសោធន៍ ដែលអាចមាន ជាលេខ ឬ អក្សរ។
 - ប្រសិនបើលទ្ធផលជាលេខ (ភាគច្រើនមានខ្នាត/រង្វាស់) ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្រៅចន្លោះតំលៃ
 យោងនោះ កន្លែងបញ្ចូលទិន្នន័យនឹងឡើងពណ៌ទឹកក្រកូច ដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកបញ្ចូល
 ទិន្នន័យយ៉ាងច្បាស់ថាព័ត៌មាននេះមានបញ្ហា។


The state of the s	WBC	11.0	,	×10º/L	4-10		04/03/2017	លោកស្រ៊. សុខ សាយ័ន្ន 🔻
--	-----	------	---	--------	------	--	------------	------------------------

ចំពោះទិន្នន័យដែលជាខ្នាត/រង្វាស់ជា "Single" ឬ "Multiple" នៅខាងក្រោយអ្នកគ្រាន់តែ យក Cursor ឬ យក Mouse ចុចលើកន្លែងបញ្ចូលទិន្នន័យនោះដើម្បីបញ្ចូល។ រួចធ្វើការ ជ្រើសរើសលទ្ធផលដែលបានកំណត់រួចស្រេចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។


Auramine stain	Single
Culture	Multiple

ផ្ទាំងអេក្រង់មួយទៀត នឹងលេចចេញមកដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការជ្រើស រើសនូវលទ្ធផល ដែលមានស្រាប់។

* Single : អ្នកអាចរើសលទ្ធផលបានតែមួយគត់

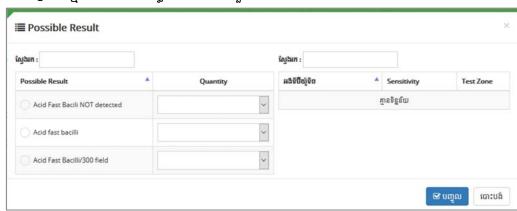

* Multiple : អ្នកអាចរើសលទ្ធផលបានច្រើន

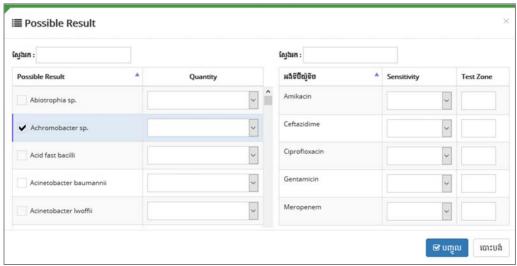

នៅពេលធ្វើការជ្រើសរើសលទ្ធផលរួច សូមចុចលើប៊ូតុង "បញ្ចូល" ដើម្បី បញ្ជាក់។

- ចំពោះប្រអប់ទិន្នន័យដែលមិនមានខ្នាត/រង្វាស់ អ្នកវាយបញ្ចូលអ្វីក៏បាន (Free Text)។
- **កាលបរិច្ឆេទធ្វើពិសោធន៍**៖ គឺជាកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើតេស្តទៅលើសំណាក។ អ្នកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរវាទៅតាមការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង
- វិភាគដោយ៖ គឺជាឈ្មោះអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលធ្វើតេស្តលើ សំណាកមួយនេះ។ វា ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាស្រេចដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍នីមួយៗ។ សូមសាកសួរទៅកាន់ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកប្រសិនបើមិនមានឈ្មោះអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីរជ្រើសរើសនេះទេ។
- **រាគវិនិថ្ល័យ**៖ គឺជារោគវិនិថ្ល័យ ឬ រោគសញ្ញាផ្សេងៗ ដែលគ្រូពេទ្យបានកំណត់ និង ភ្ជាប់មក ជាមួយទំរង់ស្នើរសុំ ដែលអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ អាចសរសេរ ឬ ជ្រើសរើសនៅបាន។


៦-សូមចុចលើប៊ូតុង **់រក្សាទុក** សម្រាប់រក្សាទុកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកបានបញ្ចូល។ ៧-ឬចុចលើប៊ូតុង **់រក្សាទុក & មើលលទ្ធផល** សម្រាប់រក្សាទុក និង បញ្ចេញលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺ ដែលអ្នក ទើបបញ្ចូលរួច។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់មើលតែលទ្ធផលរបស់ផ្នែកណាមួយសូមចុច យកប្រអប់ **២**vew ដែលនៅជិតនិងឈ្មោះផ្នែកនិមួយៗ (អ្នកអាចរើសបានច្រើន)។

៥.២ ការបញ្ហាលលទ្ធផលបាក់តេវី

ការបញ្ចូលលទ្ធផលសម្រាប់បាក់តេរី ស្រដៀងនឹងការបញ្ចូលលទ្ធផលសម្រាប់តេស្ត ផ្សេងៗទៀតដែ រ។ ប៉ុន្តែចំនុចដែលខុសគ្នានោះ គឺលទ្ធផលបាក់តេរីអាចមានច្រើន លើសពីមួយ ហើយលទ្ធផល នីមួយៗអាចមាន Antibiotic Sensitivity ច្រើន។

១- សូមអនុវត្តដូចចំនុច ៥.១ ចាប់ពីលេខ ១ រហូតដល់លេខ ៦។

២-ភាគច្រើននៃទិន្នន័យបាក់តេរីគឺមានពាក្យ "Multiple" នៅខាងក្រោយ។ សូមចុច លើកន្លែងបញ្ចូលព័ត៌មាននោះដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញផ្ទាំងលទ្ធផលដែលអាចជ្រើសរើស យកបាន។ ៣-ជ្រើសរើសលទ្ធផលណាមួយដែលស្របនឹងលទ្ធផលដែលអ្នកបានរកឃើញ។ ប្រសិនបើលទ្ធផល នោះតម្រូវឲ្យមានការធ្វើ Antibiotic Sensitivity បន្ថែមទៀត តារាង អង់ទីប៊ីយោទិក នឹងលេចចេញ មក ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសភាពស៊ាំរបស់វាដែលមាន "Sensitive, Intermediate, Resistant"។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលផងដែរនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹង Zone និង ជ្រើសរើសប្រភេទអង់ប៊ីយូ ទិកណាដែរអ្នកមិនចង់វាយការណ៍ទៅកាន់គ្រូពេទ្យ។

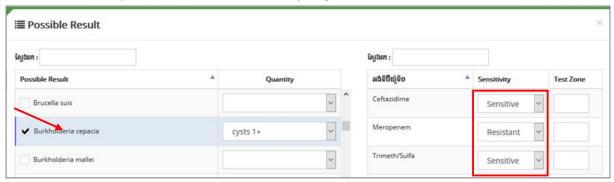

ចុចលើពាក្យ "**បញ្ចូល**" នៅពេលបញ្ចប់ការជ្រើសរើស រួចអនុវត្តដូចចំនុច ៥.២ ត្រង់លេខ ៧ និង លេខ ៤ ខាងលើសម្រាប់ការងារផ្សេងទៀត។

៥.៣ ការបញ្ហេញលទ្ធផល

ជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺនីមួយៗតាមរយៈ លេខកូដមន្ទីរពេទ្យ និង លេខកូដសំណាករបស់អ្នកជំងឺ (សូមមើលចំនុច ៤.៣) ។

១-សូមធ្វើតាមដូចចំនុច ៤.៣ ចាប់ពីលេខ ១ ដល់ លេខ ៦ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំងឺចាស់ដែលបាន បញ្ចូលទិន្នន័យរួច

សំគាល់៖

- កំណត់ត្រាដែលបានបញ្ចូលនឹងបង្ហាញឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់អ្នកជំងឺមួយៗ
- ហាមប្រើប្រាស់ Ctrl + P ដើម្បីបោះពុម្ភលទ្ធផល

៦) ការវិភាគទិន្នន័យ

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើ ការវិភាគ ការ គ្រប់គ្រង និង ការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានស្ដីពីសកម្មភាពនៃមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សុខភាព ប្រជាជនទាំងមូល។ គោលបំណងនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះមិនមែនសម្រាប់តែបង្កើតឯកសារជា ក្រដាស ឬ ជាអេឡិចត្រូនិចនោះទេ ប៉ុន្ដែក្នុងន័យផ្ដល់នូវព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍ដល់អ្នកព្យាបាល អ្នកទទួល បន្ទុកកម្មវិធីសុខភាពផ្សេង រួមទាំងមន្ទីរពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ដនៅ ពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងជាក់លាក់មួយ។

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបធ្វើរបាយការណ៍មួយចំនួន សម្រាប់ផ្តល់ឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្ត បន្ទាប់ពីយើងបានប្រមូល និង គ្រប់គ្រងព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍រួចហើយ។

b.១ ការបង្កើតរបាយការណ៍តាមអ្នកជំងឺ

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ និង ប្រវត្តិនៃការធ្វើវិភាគ មន្ទីរពិសោធន៍របស់ គាត់ដែលធ្លាប់មាន។

ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ "**បង្កើតរបាយការណ៍**"

២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែល យើងចង់ធ្វើ។




៣-សូមជ្រើសរើសយក របាយការណ៍ "ឯកត្តជន" រួចបញ្ចូលលេខកូដសំគាល់អ្នកជំងឺ ឬ ឈ្មោះអ្នក ជំងឺ ឬ លេខកូដសំណាកដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍។

៤-ចុចលើប៊ូតុង **"បង្ហាញទិន្នន័យ**" ដើម្បីបើកលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ រួចធ្វើការ បោះពុម្ភទៅតាមតម្រូវការ។

៦.២ ការបង្កើតរប្វាយការណ៍បាក់តេវីសាស្ត្រ

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីព័ត៌មានសរុបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកបាក់តេរី។ ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖ ១-ចុចលើបញ្ជី **ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ **"បង្កើតរបាយការណ៍"** ២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែល យើងចង់ធ្វើ។

:. របាយការណ៍ CamLIS

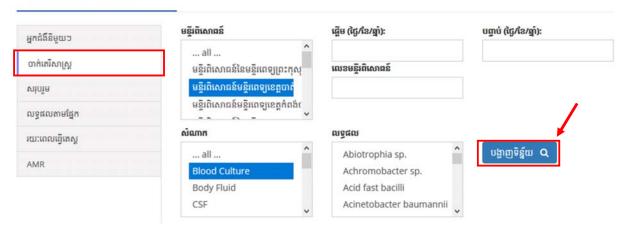

៣-សូមជ្រើសរើសយក របាយការណ៍ **បាក់តេរីសាស្រ្ត** រួចបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ទៅតាម លំដាប់ចាប់ពី **មន្ទីរពិសោធន៍ ដេប៉ាតឺម៉ង់ សំណាក តេស្ត លទ្ធផល លេខកូដមន្ទីរពិសោធន៍ កាល បរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម ឬ បញ្ចប់**។

៤-ចុចលើប៊ូតុង **"បង្ហាញទិន្នន័យ**" ដើម្បីបើកលទ្ធផលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកបាក់តេរី សាស្ត្រ ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ (រូបខាងក្រោម)។ ក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺមានតែលទ្ធផលវិជ្ជមានតែ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ ដើម្បីស្រង់យកទិន្ន័យផ្សេងទៀតសូមចូលទៅក្នុងចំនុច ៦.៧។

ដៃ របាចរកមណ៍ជា Excel														I		,	¢												
	Note: S = Sensitive, R = Resistant, I = Intermediate																												
10					Gram Positive										14	Gram							iram N	egat					
Lab Name	Lab ID	Sex	DOB	Sample	Collection Date	Test Date	Result	Amoni Clav	Cettriaxone	Cephalothin	Chloramphenicol	Gindamycin	Oscacilin	Engtheomycin	Norfloxacin	Oxacilin	Pericitin	Tetracycline	Trimeth, Suita	Vancomycin	Ampioilin	Amikacin	Authromydin	Cetazolin	Cefepime	Cettaridime	Ceftriaxone 30 GNB	Cprofloxacin	Fostomydin
BTB	5352-29082017	м	1956-01-01	Blood Culture	27-08-2017	29-08-2017	Burkholderia pseudomallei	5											5							5		R	_
втв	5315-23082017	F	1980-08-17	Blood Culture	22-08-2017	23-08-2017	Streptococcus viridans, alpha-hem.		S		5	\neg		\top			1	\neg		\top	\top			\neg					$\overline{}$
BTB	5265-17082017	F	1959-01-01	Blood Culture	15-08-2017	17-08-2017	Escherichia coli	5	R		1								1		R	5		R		1		R	\equiv
BTB	5264-16082017	F	1949-08-15	Blood Culture	15-08-2017	16-08-2017	Klebsiella pneumoniae	R	R		5								3		R	5		R		R		R	
BTB	5261-16082017	м		Blood Culture	14-08-2017	16-08-2017	Staphylococcus aureus				5		R S				-	R	8					R					
BTB	5242-12082017	F		Blood Culture	11-08-2017	12-08-2017	Staphylococcus aureus				S	R	5 8	3			R	5	5		\perp			S					
втв	5234-12082017	М		Blood Culture	11-08-2017	12-08-2017	Klebsiella pneumoniae	5	S		5							- 1	3		R	5		S		S		R	
втв	5175-31072017	М		Blood Culture	29-07-2017	31-07-2017	Non-fermenting gram negative rods													1		5				R		S	
BTB	5175-31072017	М		Blood Culture	29-07-2017	31-07-2017	Pseudomonas aeruginosa						_	-			_	_	_			5				5		5	
	5175-31072017	м		Blood Culture	29-07-2017	31-07-2017	Staphylococcus aureus	_			5	R	R 8	1	\perp		R	R	5	\perp	_			R		_	_		
втв	5173-01082017	F	1954-07-31	Blood Culture	30-07-2017	01-08-2017	Klebsiella pneumoniae	1	R		5								5		R	5		R		R		R	

៥-ចុចលើប៊ូតុង "របាយការណ៍ជា Excel" ដើម្បី ទាញយករបាយការណ៍នេះជាទំរង់ MS Excel ដើម្បីរក្សា ទុកសំរាប់ធ្វើការងារផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ ទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។



មិត្តមិន

៦.៣ ការបង្កើតរបាយការណ៍សរុប

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីព័ត៌មានសរុបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍គ្រប់ផ្នែកទាំង អស់ដែលមានទៅតាមភេទ និង អាយុផងដែរ។

ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ **"បង្កើតរបាយការណ៍**"

២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែល យើងចង់ធើ។

អ្នកជំងឺនីមួយៗ	ធ្វើម (ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ):	បញ្ចាប់ (ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ):	
បាក់តេរីសាស្ត្រ			បង្ហាញទិន្ន័យ Q បាះពុម្ភ 🖨
សរុបរួម		No data	
លទ្ធផលតាមផ្នែក		No data	
រយៈពេលធ្វើតេស្ត			
AMR			

៣-សូមជ្រើសរើសយក របាយការណ៍ **"សរុបរួម**" រួចបញ្ចូល **កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម និង បញ្ចប់**។ ៤-ចុចលើប៊ូតុង "**បង្ហាញទិន្នន័យ**" ដើម្បីបើកលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ៥-ចុចលើប៊ូតុង "**បោះពុម្ភ**" ដើម្បីបោះពុម្ភចេញ។

៦.៤ ការបង្កើតរបាយការណ៍សរុបតាមផ្នែក

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីព័ត៌មានសរុបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ទៅតាមផ្នែក ពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺនិមួយៗ ដែលបានស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍កន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកវិភាគអាចដឹង បានថា តើតេស្តគ្រាប់ឈាម ភាគច្រើនស្នើសុំដោយផ្នែកមួយណា? ។(មើលឧបសម្ព័ន្ធ ទី ២)

ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ "**បង្កើតរបាយការណ៍**"

២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែល យើងចង់ធ្វើ។



៣-សូមជ្រើសរើសយក របាយការណ៍ **ផ្នែកនិមួយៗ** រួចបញ្ចូល **កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម និង បញ្ចប់**។

៤-ចុចលើប៊ូតុង **បង្ហាញទិន្នន័យ** ដើម្បីបើកលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ រួចធ្វើការបោះ ពុម្ភទៅតាមតម្រូវការ។

៦.៥ ការបង្កើតរប្វាយការណ៍រយៈពេលធ្វើតេស្ត

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីរយៈជាមធ្យមនៃការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ទៅតាមតេស្តនិមួយៗ ដោយ ផ្អែកលើកាលបរិច្ឆេទប្រមូលសំណាក កាលបរិច្ឆេទទទួលសំណាក និង កាលបរិច្ឆេទបញ្ចេញលទ្ធផល។ នៅ ក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏មានបង្ហាញផងដែរនូវរយៈពេលអប្បបរមា និង អតិបរមាសំរាប់ការធ្វើតេស្តនិមួយៗ និង បែងចែកទៀតតាមលក្ខណៈរបស់សំណាកដែលមាន សំណាកបន្ទាន់ និង សំណាកធម្មតា។ (មើលឧបសម្ព័ន្ធ ទី ៣)

ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ **"បង្កើតរបាយការណ៍**"

២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែល យើងចង់ធ្វើ។



៣-សូមជ្រើសរើសយក របាយការណ៍ **រយៈពេលធ្វើតេស្ត** រួចបញ្ចូល **កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និង បញ្ច** ប់។

៤-ចុបលើប៊ូតុង **បង្ហាញទិន្នន័យ** ដើម្បីបើកលទ្ធផលដែលបានកាឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ រួចធ្វើការបាះ ពុម្ភទៅតាមតម្រូវការ។

៦.៦ ការបង្កើតរប្វាយការណ៍ AMR (Antimicrobial Resistance)

របាយការណ៍នេះមានតួនាទី ជំនួយដល់ការតាមដានភាពស៊ាំនៃឧសថប្រឆាំងមេរោគ ដែលសព្វថ្ងៃ នេះមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅក្នុងរការណ៍នេះនឹងបង្ហាញពីពត័មានជាក់លាក់ទាក់ទងនិង ព័ត៌មានរបស់អ្នកជំងឺ ប្រភេទវត្ថុវិភាគ មេរោគដែលបានរកឃើញ និង ភាពស៊ាំរបស់មេរោគ។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ អាចទាញយកទិន្នន័យទាំងនេះ ហើយចែករំលែកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យផ្សេងទៀតបាន ដូច មជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរបស់ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាដើមសំរាប់ធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៀត។


៦.៧ ការស្រង់យកទិន្នន័យ

ក្រៅពីរបាយការណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ CamLIS អ្នកក៏អាចធ្វើការវិភាគផ្សេងទៀតដើម្បី ស្រង់យកទិន្នន័យបន្ថែមទៀត។ ការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែដាក់នូវលក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួន និង ជ្រើសរើស ព័ត៌មានដែលត្រូវបង្ហាញ ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធស្វែងរក និង បង្ហាញនូវទិន្នន័យទាំងនោះចេញមក។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ អាចបញ្ជូនទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញទៅជាទំរង់ MS Excel សំរាប់ធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៀត។

ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ចុចលើបញ្ជី **"ការវិភាគទិន្ន័យ**" រួចចុចលើ "**ការស្រង់ទិន្នន័យ**"

២-អេក្រង់មួយថ្មីទៀតនឹងបើកឡើងមក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចូលនូវលក្ខខ័ណ្ឌទៅតាមប្រអប់ ទិន្នន័យដែលមាន និង ជ្រើសរើសប្រអប់ទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញ។

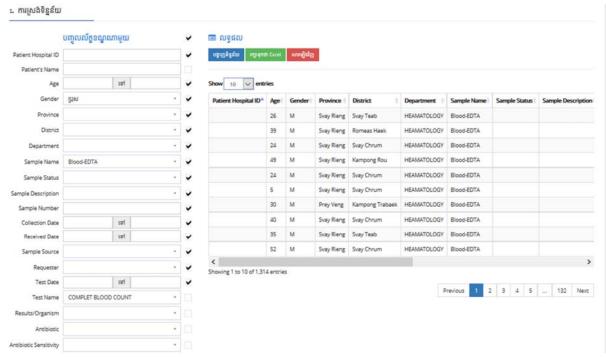

៣-បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរួចសូមចុចលើប៊ូតុង "**បង្ហាញទិន្នន័យ**" ។ ទិន្នន័យដែលរកឃើញនឹងបង្ហាញដូច រូបខាងលើ ដោយមានបញ្ជាក់ពីចំនួនសរុបនៅខាងក្រោម។ សូមចុចលើលេខរៀងរបស់ទំព័រ ដើម្បី បង្ហាញទិន្នន័យផ្សេងទៀត។

៤-ចុចលើប៊ូតុង "**រក្សាទុកជា Excel**" ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យជាទំរង់ Excel។ ៥-ចុចលើប៊ូតុង "**សារឡើងវិញ**" ដើម្បីលប់លក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ និង សំអាតផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យ។



Department of Hospital Services

Bureau of Medical Laboratory Services

User Guide for Cambodia Laboratory Information System

Cambodia Laboratory Information System

Sept 2017

Preface

In the previous decade, new modern technology has been notably developed. Likewise, the emerging and spread of pandemic diseases around the world highlight the importance of laboratory testing and pathogens identification to support disease surveillance and diagnosis, with the aim of serving public health needs. This includes assisting clinicians in diagnosis and research on the causes of illness and possible exposure in order to setup control measures to prevent and provide timely patient treatment. The establishment of laboratory information systems allows for standardization of laboratory results in both general and microbiology testing. Furthermore, the laboratory information system will be linked to the Patient Management Registration System (PMRS), which is the data center at Ministry of Health, and will be used to support national health information management.

The Ministry of Health has developed this laboratory information system, called "CamLIS (Cambodia Laboratory Information System)", with the support of the World Health Organization (WHO). The laboratory information system, CamLIS, will help with data management including patient demographics, laboratory analysis results, antimicrobial resistance...etc. It will also assist epidemiologists with data management and analysis in order to set up control measures and response to disease outbreaks, prevention policies for epidemics and response plans for associated authorities.

The Ministry of Health would like to show gratitude for the financial support, technical support, and the invaluable participation to develop "CamLIS" from the Sub-technical working group for blood safety and Medical laboratory services, and microbiology laboratory network of Hospital Services Department, World Health Organization, URC, as well as Foundation Merieux, and DMDP who have supported the rolling out of this system.

Acknowledgements

1. H.E. Prof Eng Huot Secretary of State

2. H.E. Dr Or Vandine Director General for Health

3. Dr. Sok Sr un Director, Department of Hospital Services

4.Dr. Hok Kimcheng Director, National Blood Transfusion Centre

Country focal point for blood safety and Laboratory Services

5. Dr. Sau Sokunna Deputy Director, Department of Hospital Services

Country focal point for blood safety and Laboratory Services

Director of National Biosafety committee

6. Ph. Sam Sopheap Chief, Bureau of Medical Laboratory Services

7. Ph. Uch Monipheap Vice Chief, Bureau of Medical Laboratory Services

8. Ph. Ou Kimsan Vice Chief, Bureau of Medical Laboratory Services

9. Dr. Boy Chansapheap Staff of Bureau of Medical Laboratory Services

10. Dr. Reiko TSUYUOKA Team leader Emerging Disease Surveillance and Response (ESR),

WHO Cambodia

11. Dr. Nima Ascari Former Team leader Emerging Disease Surveillance and

Response, WHO Cambodia

12. Dr. Alex Costa Former laboratory technical officer, WHO Cambodia

13. Mr. Ieng Vanra Information Systems technical officer, WHO Cambodia

14. Ms. Joanne Letchford Cambodia Country director. Diagnostic Microbiology

Development Program

15. University Research Co., LLC (URC), Other laboratory experts, SubTWG for Blood Safety

and laboratory services

Contents

1)	Introdu	ıction	1
	1.1	Why was this database developed?	1
	1.2	How to use this manual	1
2)	How to	use the system	2
	2.1	Log in to system	2
	2.2	Changing user account or password	4
	2.3	Log out from system	6
3)	Patient	s Data	7
	3.1	Enter patient	7
	3.2	Find patient data	9
	3.3	Delete patient data	10
4)	Sample	Information	11
	4.1	Add new sample	11
	4.2	Assign test	12
	4.3	Search and Update sample	13
	4.4	Delete sample	15
	4.5	Reject sample	15
5)	Labora	tory Results	17
	5.1	Enter laboratory results	17
	5.2	Enter microbiology results	20
	5.3	Print results	21
6)	Analys	is	22
	6.1	Individual report	22
	6.2	Microbiology report	22
	6.3	Aggregated report	24
	6.4	Ward report	24
	6.5	Turn around time report	25
	6.6	AMR report	25
	6.7	Query extractor	26

1) Introduction

1.1 Why was this database developed?

The laboratory is essential for the experimental analysis of specific patient samples, enabling doctors to diagnose and provide patient follow-up, as well as proper and timely treatment. This information will help to mitigate the risk of diseases that affect public health. As such, the efficient management, storage, and analysis of all laboratory information is essential. Previously, all such information was stored by each laboratory in an incomplete and non-standardized manner. These issues made it difficult for doctors and health professionals to find the data needed for decision making.

Therefore, in early 2012, with the collaboration and technical assistance of the World Health Organization, the Ministry of Health developed a laboratory information management system called CamLIS (Cambodia Laboratory Information System). This database allows all laboratory personnel to enter their laboratory data and perform analysis as required. Similarly, data from each laboratory is sent to a database center via internet connection, allowing other key personnel in the Ministry of Health to analyze and monitor data. CamLIS has been linked to a patient registration database in the Patient Management Registration System (PMRS) since 2015, with technical assistance from University Research Co. (URC).


1.2 How to use the manual

The laboratory information system manual describes the laboratory information management system, highlighting the processes and components of the entire electronic laboratory information system used in the Kingdom of Cambodia. The following functions and activities can be performed by the whole system:

- Registration: Search or Enter patient information
- Sample entry: Search or Edit information related to patient samples
- Result entry: Enter and Validate laboratory results
- Report generation: individual patient report and aggregated report
- Extract data based on conditions and filters
- Other system management related to the system parameters, possible test results, antibiotics, and users.

2) How to use the web based system

This section aims to introduce laboratory personnel to CamLIS in the management of laboratory information by starting with the following:

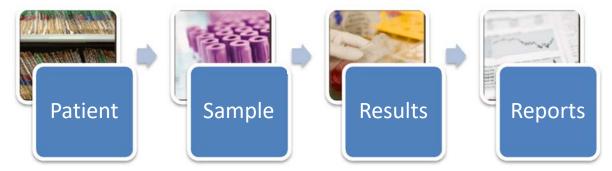

Hospitals with PMRS: The patient record is retrieved from the PMRS system that has been inserted from the outpatient site using the patient's code.


Hospitals without PMRS: Laboratory personnel must enter the patient's record manually.

The next step involves entering the **sample-related information** and selecting the type of test that the physician or doctor requested for analysis. After analyzing the results, the laboratory personnel shall incorporate those **results** into the CamLIS system and report those results to the physician. In this case, it is crucial that the results are verified and validated by the laboratory personnel to avoid any human or machine-prone error.

Finally, the data must be provided within a format that can ease the decision making process. The report section will provide various formats for CamLIS users.

2.1 Log in to system


To access the CamLIS web based database, an internet connection and a browser software, such as Firefox or Chrome, are required. Next, the web address **www.camlis.pmrscambodia.org** should be entered to open the CamLIS web based database. If the address has been entered correctly, it should display the following interface for entering the username and password into the application.

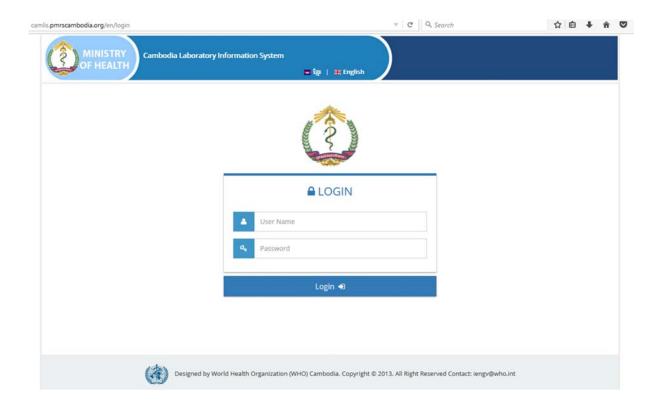

The username and password that was created and given by the administrator must be entered, then click "login". If username and password were entered incorrectly, a "Username or password do not match." display will appear, after which the procedure must be repeated until correct username and



password have been entered (picture below)

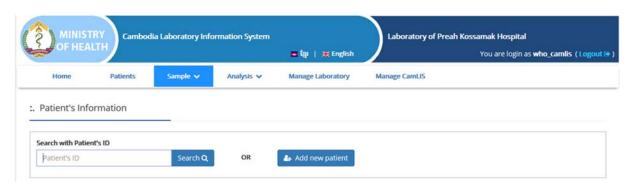

2.2 Changing user account or password (for laboratory manager)


The username and password have been created and assigned by the laboratory managers of each laboratory. The user account can be manually changed by the user or by laboratory manager.

To change the user account manually


1- Click on the username at the top-right corner of the screen




2- A new screen will appear, allowing the user to make edits to the personal information, as well as the password (user must remember the old password).

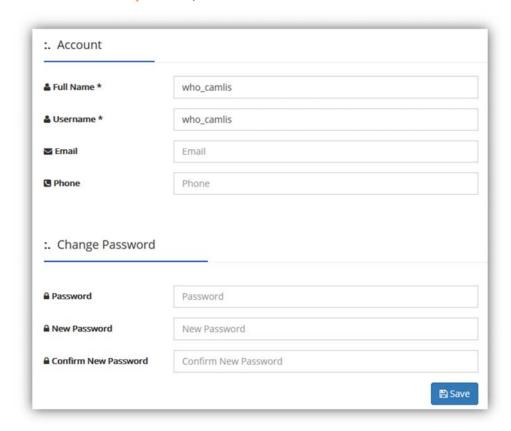

- Enter the old password, then enter the new password twice for verification or editing of any information as needed, then click save.
- 3- To change the user account and password via laboratory manager (does not require old password):
 - Click on the menu "Manage Laboratory then select "User Account" on the left.

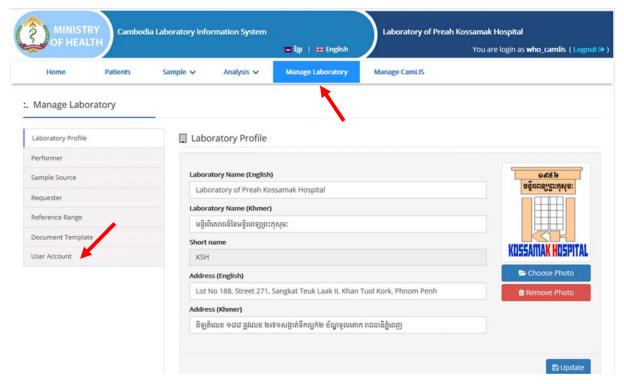

- A new screen will display all the existing users of the laboratory.
- Click on edit , is in the same row as the username, in order to change the password.

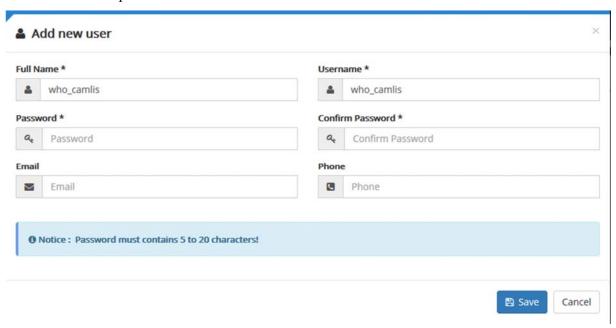

- Enter the new password into "Password" and "Confirm password" fields or other information field, then click save.

2.3 Log out from system

Usually, exiting an application is simple. Likewise, for this application, all that is needed is to click on "logout". Any existing work will be closed, allowing other users to login. To close the internet browser, click on the cross (X) at the top-right corner.



Note:

- Creating new user accounts requires an administrator or lab manager to create a username and password for them.
- Avoid using others' usernames and passwords to access the system
- Be cautious of upper and lower-case letters when creating new passwords or entering the passwords. i.e. A is different from a. Letter cases does not affect the usernames.

3) Patient Information

After having successfully accessed the application, users are able to proceed to the next steps within the database. This section will provide information on how to enter new patient data and searching patient data from the PMRS system before linking those patients to the requested samples. At the same time, this section will show how to input the necessary patient data before saving it into the system.

3.1 Enter patient data

To enter patient data, you must do as the following:

1- Click on menu "Sample" then select "Add new sample"




▶ For CamLIS linked with PMRS

- Begin by entering the patient ID into the patient ID box then select "Search"



- If the system cannot find the entered patient ID, it will display "No result found"
- If the system finds the entered patient ID, it will display the patient data and will allow the laboratory personnel to begin the sample data entry (see following picture)

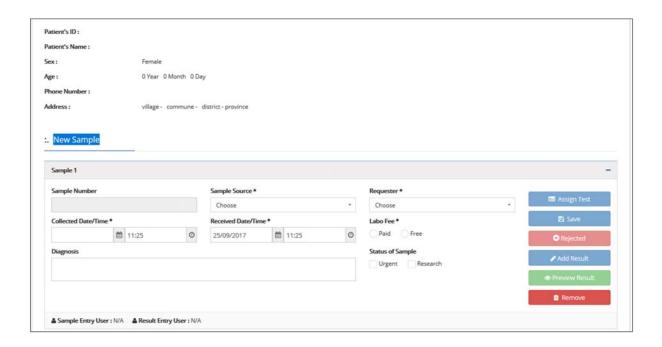

> For CamLIS not linked with PMRS

- Click on Add new patient to access the web page for patient data entry:



- + Patient's name: Name or initials written on the request form
- + **Sex**: Sex of patient (Male/Female)
- + **Date of birth**: Patient date of birth. No need to fill in if data is unavailable. Patient age will be automatically calculated once entered.
- + **Age**: Length of time from patient birth to date of hospital admission. Once entered, patient date of birth will be automatically calculated.
- + Telephone number: Patient contact number, if available.
- + Address: Includes Province/City, District, Commune, Village
- Click on "Save" to verify and save the data.
- Click on "Cancel" to exit

3.2 Find patient data

To find patient data, you must do as the following:


1- Click on "Patient"



2- Enter the patient ID or Patient Name into the patient's information field and click "Search"



- 3- If the system cannot find the entered patient ID, it will display "No matching records found"
- 4- If the system finds the entered patient ID, it will display the patient's data as in the following picture.

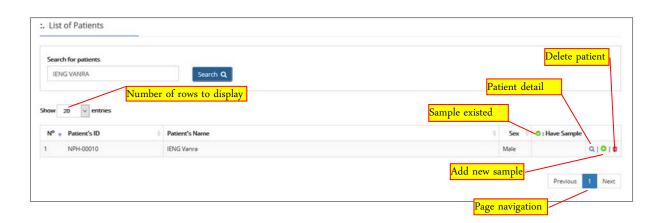


3.3 Delete patient data

To delete the patient data, select which patient data to delete by clicking



The following message will appear to confirm deletion.

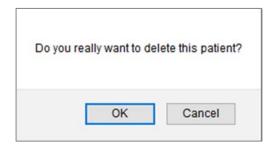

To delete, click on "OK" or click on "Cancel" if for no deletions to occur.

Note:

- All dates must follow the day-month-year format, or select the date via the provided calendar.
- The system will automatically assign a new patient ID if no input from users.
- You must have user right to delete patients.
- Deleted data can be restored by the administrator.

4) Sample Information

This section will explain how to enter new patient samples, edit previous samples, and how to assign requested tests by the physicians into CamLIS.


At the laboratory, this activity is usually done in a consultation room or at sample collection room, and plays an important role in the process of the laboratory information system. If this activity is not done correctly, laboratory staff may not be able to enter the results for the specimen. As a consequence, the doctor will not possess sufficient information for treatment.

4.1 Add new sample

This allows users to select patients from PMRS or enter new patient data (see 3.1) that has yet to be tested, in order to include additional information and samples.


To enter new sample data for any patient: Follow 3.1 in order to enter new patient data.

1- Enter sample information like the following:

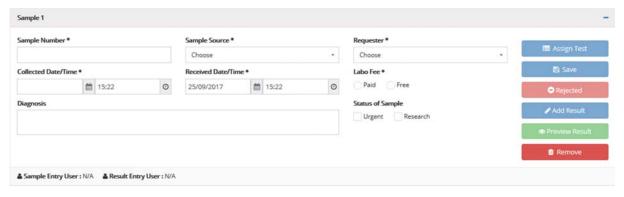

- + **Sample number**: readily defined by the administrator in the format (xxx-ddmmyyyy)
- + Sample source: name of ward, sector, or institution that sent the specimen.
- + **Requester**: name of doctor or responsible for requesting tests.
- + Collection date/time: date and time of sample collection. Received date/time: date and time of sample arrival to laboratory.
- + **Paid**: Confirmation that analysis was paid by patient

- + Free: Comfirmation that no payment was required by patient.
- + **Urgent**: Samples requiring immediate results.
- + **Research**: Samples sent for researchpurposes.
- + **Diagnosis**: diagnosis, ymptoms and clinical history of the patient.
- 2- List of usable bottons

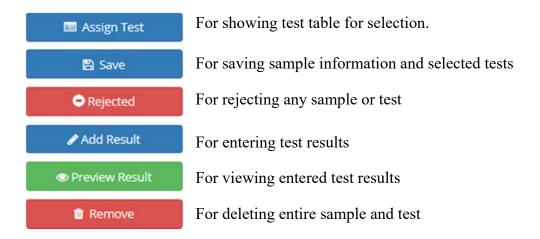


3- After a sample has been entered, the application will display a new button below for entering another sample.

4.2 Assign test

After entering all the sample information, any requested tests for analysis must be assigned:

1- Click on on the sample for which the test is to be assigned. The test table, organized by unit (hematology, etc) as below, will appear for test selection:

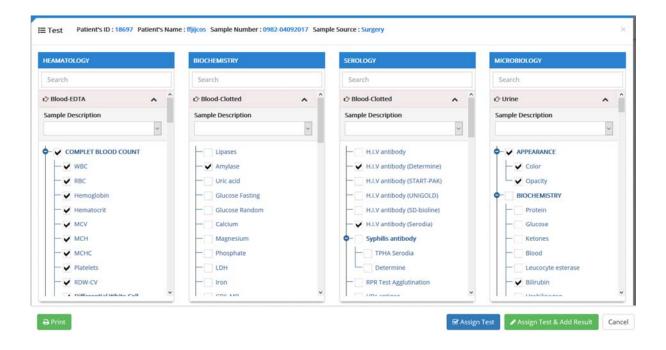

- 2- Select the test to be performed, then click on "Assign Test" to save
- 3- If results for the selected test are to be entered immediately, click on "Assign test & Add result", andthe table for entering results will appear.
- 4- To print the selected test, click on "Print"
- 5- To exit without saving, click "Cancel"

4.3 Search and Update sample

This section will allow users to add new samples, or make edits to existing samples, and tests for patients who had already been tested.

For this:


1- Click on "Sample" then click "View Sample"




- 2- Another screen will appear showing the table of patients that had previously been entered
- 3- This table is divided into two:
 - a- Table for urgent patient tests

b- Table for routine patient tests

-

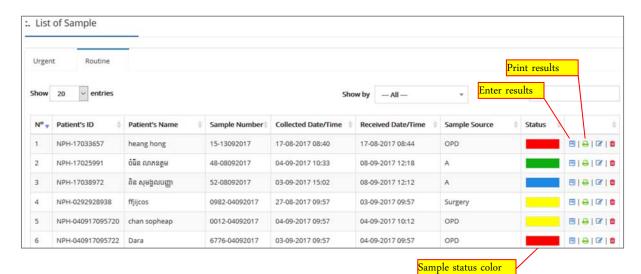


Colors represent sample condition:

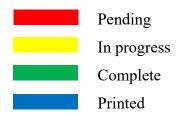


- 4- Users can open individual pages to find specific patients:
 - + **Previous**: for viewing the first registered patient
 - + Page number [1]: for viewing each page
 - + Next: for viewing the last registered patient
 - + Users may also enter filters into "Search" box to find specific patients such as: Patient's ID, Patient's name, Sample ID, etc.
- 5- After finding the patient, click on Edit 7
- 6- Patient sample information will appear (see 4.1), which may then be edited if necessary, the same goes for the test selection table.

It will also show the following information:

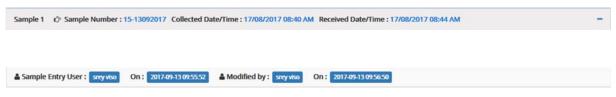

7- After making edits, clicksave.

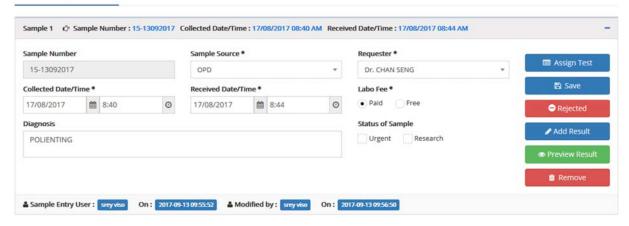

8- If entering more samples is required for each patient, click on


+ Add New Sample
then enter the sample information into the data fields (see 4.1).

4.4 Delete sample

Deletion of samples, as well as other data, requires extreme caution and attention as deleted data cannot be restored. If a sample is deleted, all tests performed on it will also be deleted.

To delete samples,:

- 1- Follow steps 1 to 4 in section 4.1
- 2- Once the sample that is to be deleted is found, select confirmation message will display as below:

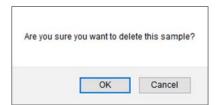


3- Click Ok for deleting sample, or cancel to return (no deletion will occur).

4.5 Reject sample

Staff working at sample receiption may refuse testing of samples requested by the doctor, if a sample is deemed inappropriate.

- 1- Follow steps 1 to 4 in section 4.1
- 2- Click to open the sample rejection page.

- 3- Select "Reject Sample" to refuse sample and all associated tests, or click on a specific test to select which test to reject. Enter reasons for rejection into the "Comment" box or click on "Choose comment" to choose predefined reasons.
- 4- Select "Save".

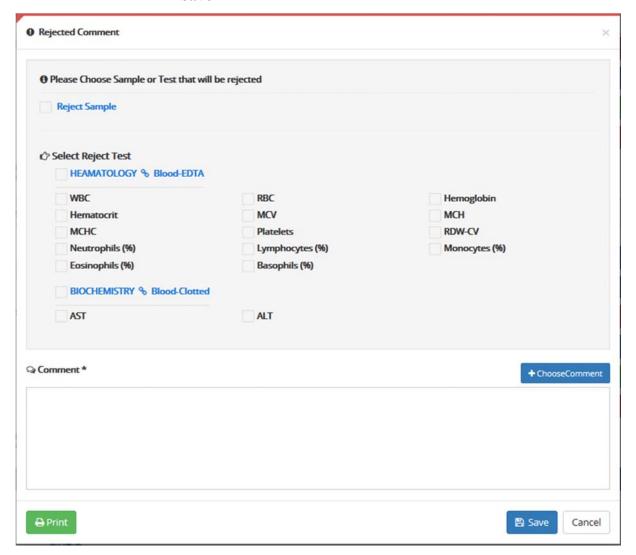

5- For printing rejected tests, select "Print".

Note ៖

- Rejection can only be done if the user has already selected the tests requested by the doctor.

5) Laboratory Results


When patient and sample information have been entered into the system, the test results can then be entered. This is the area where laboratory technician has an importance role for the functioning of the system. The laboratory technician is responsible for entering all information related to the laboratory results for each patient. The laboratory manager may also verify the results before submitting them to a doctor or a patient.

5.1 Enter laboratory results


This section allows users to select new patients or patients sample number to enter results pertaining to sample and tests .

To enter test results: Follow steps 1 to 4 in section 4.1

1- Click on "Add result" (see picture below)

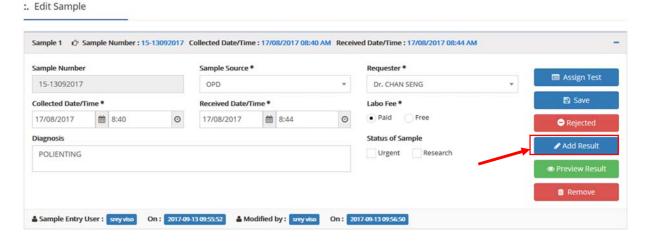

- 2- A new screen will appear which will allow the user to enter results based on the requested tests.
- 3- Enter results based on the test name's order to avoid data entry error. Unit and reference ranges for each test will also be visible to the data entry officer. If a patient has many tests, click on the scroll bar at the right side of the page to scroll the page up or down.

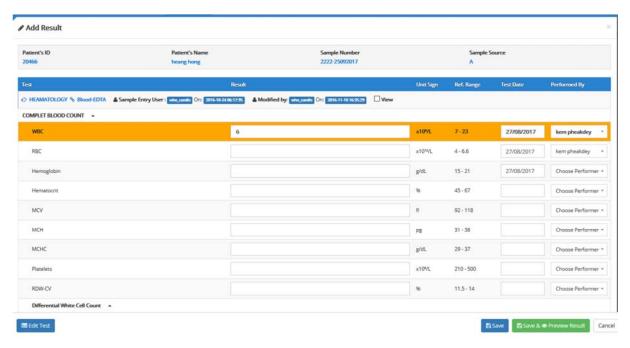

4- Information required:

- **Result**: Test results collected from the analyzer machine including numeric or text format.
 - ➤ If numeric results (usually with units) are entered outside the reference ranges, the entire row will be highlighted in orange, indicating entry of anomalous values..




➤ For results having units as "Single" or "Multiple", the cursor should be moved in or use the mouse click in the result field. After that, select any results that already available in the list.




Another screen will appear, allowing the user to select possible results in the list.

* Single: only one result can be selected

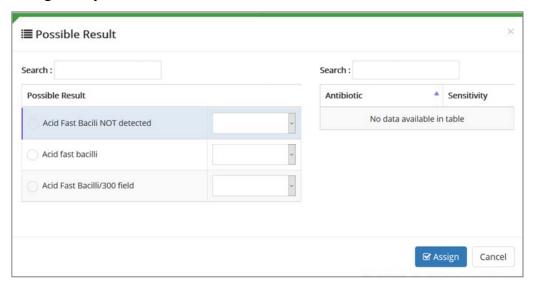

* Multiple: more than one result can be selected

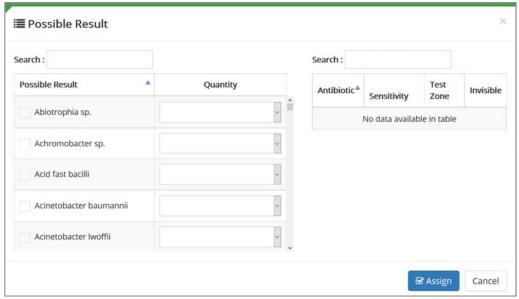

After choosing the possible results, click on "Assign" to confirm.


- For the result boxes with no units, any text can be filled in (Free Text).
- + **Test Date:** date of sample testing. needs to be changed according to the actual test date.
- + **Performed by:** name of laboratory technician who performed testing on each sample. All laboratory technicians' names should have already be in the system, previously registered by the laboratory manager. If there are staff names missing the laboratory manager should be informed so they can be added in the system..

- + **Diagnosis:** Diagnosis or signs and symptoms entered by the physician on the request form, which may then be entered or selected from the list by the laboratory technician.
- 5- Click on "Save" to record all the information entered.
- 6- Alternatively click on the button "Save and Preview Result" to record and preview all the information entered. To preview for specific results, click on the check box located next to each department (you tick more than one department).

5.2 Enter microbiology results

Entering microbiology results is similar to what has been described for other test results in the system. The difference is that Microbiology can have more than one result, each one in turn may have many antibiotic susceptibility testing (AST) results.

- 1. Follow section 5.1 from step 1 to 6.
- 2. The majority of microbiology results have the unit as "Multiple". Click on the result field to display all possible result selections Choose the correct result, according to what you have identified. If another AST is required, another anbitibiotic table will appear for susceptibility specification, i.e., "Sensitive, Intermediate, Resistance". The test zone may also be entered, and invisible may be selected if no AST is to be reported to the physician.

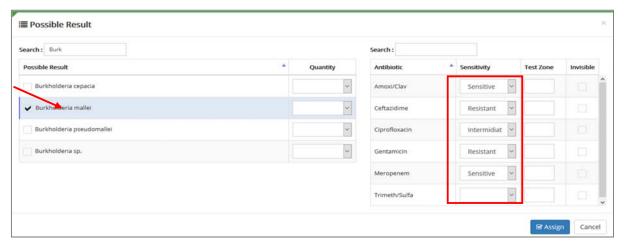

Click on the button "**Assign**once all selections have been done and follow the same activity in 5.2 from step 7 to 8 above for other tasks.

5.3 Print results

In general users can easily find patient's results by using patient ID, patient name and sample number (see section 4.3).

- 1. Follow section 4.3 from step 1 to 6 to find the patient sample that already had results.
- 2. Click on Preview Result to preview patient results.
- 3. Verify and valide the results and click on at the top of the screen to print.

Note

- Records entered will be available for the individual report
- Do not use Ctrl + P to print patient results

6) Analysis

This laboratory information system was developed for users to analyze, manage and share information related to laboratory activities in order to improve public health. The purpose of this web based system is not only for printing results or storing data electronically, but also to support the clinical treatment process, the laboratories andhealth related programs, to aid in the upstream decision making process.

In this part, the user will learn how to analyse data by using report templates to support decision maker after all information were collected and entered in the system.

6.1 Individual report

This report displays all results of each patient including testing history.

To make this report, follow the steps below:

- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Report Generation"
- 2. A new screen will display for the users to select type of reports to generate




- 3. Select on the report type "**Individual Report**" and input patient ID and Patient name and Sample Number to make the report.
- 4. Once finished, click on "**Filter**" to open patient results available in the system and print as needed.

6.2 Microbiology report

This report shows a list of patient reults that were tested positive in the microbiology department.

To make this report, do the following:


- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Report Generation"
- 2. A new screen will display for the users to select type of reports to generate

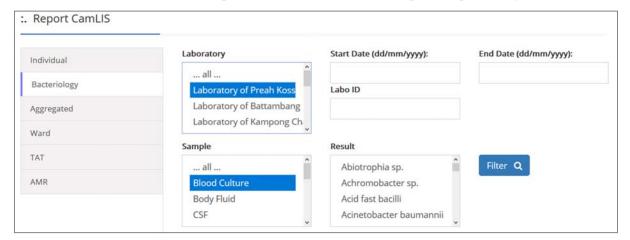

- 3. Click on "Bacteriology" and specify the conditions to be generated by the systemincluding laboratory, start/end date, Sample number, Sample, and results".
- 4. Once finished, click on the button "Filter" to open all microbiology results available in the system (see below picture). In this report, only positive results are displayed. To extract other negative results, please proceed to section 6.7



5. Clik on the button "Export to excel" to export data as Microsoft Excel spreadsheet and keep it for further data analysis without affecting the original data source.

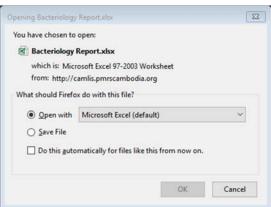

6.3 Aggregated report

This report shows total number of laboratories testing from all the wards by sex and age group.

To make this report, do the following:

- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Report Generation"
- 2. A new screen will display for thes users to select type of reports to generate



- 3. Click on "Aggregated Report" and specify the start date and end date
- 4. After finished, click on button "Filter" to display all data that has been found.
 - 5. Click on button "**Print**" to print the results.

6.4 Ward report

This report shows total number of laboratories testing per ward, including consultation ward or inpatient ward. For example, this report can be generated to understand which ward requested "Complete Blood Count test the most?"

To make this report, proceed as follows:

- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Report Generation"
- 2. A new screen will display for users to select type of reports to generate




- 3. Select the report "Ward" and enter start and end date.
- 4. Click on the button "**Filter**" to display all results found in the system and print them as needed.

6.5 Turn around time report

This report shows average duration of laboratories testing by each test based on the sample collection date, sample received date and result print date. In the table, there is also minimum and maximum duration of testing for each test and distributed by urgent and routine sample of the patient.

To make this report, do the following:

- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Report Generation"
- 2. A new screen will display for the users to select type of reports to generate

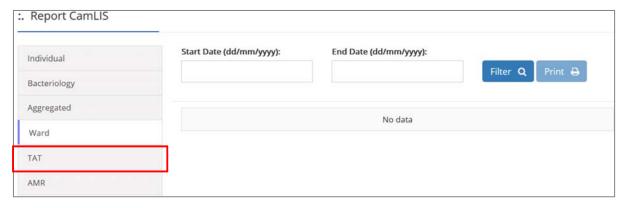

- 3. Select the report "TAT" and enter start and end date.
- 4. Click on the button "**Filter**" to display all results found in the system and print them as needed.

6.6 AMR report


This report is used to support Antimicrobial Resistance Surveillance (AMR), given the current increase of antimicrobial resistance worldwide. It will display specific information related to patient demographic information, sample type, identified pathogens and antibiotic susceptibility. Users can generate this report and distribute it to other data sources such as data center at WHO head quarter for further analysis and global sharing.

6.7 Query extractor

In addition to all the available reports in CamLIS web based database, data can be further analyzed by using this query extractor. For this purpose, the criteria and the fields to display on the output screen need to be selected. The system will search the data for you and display it. From the output screen, the data can be exported to Microsoft Excel for further analysis.

To work on the query extractor, follow the below steps:

- 1. Click on the menu "Analysis" and click on "Query Extractor"
- 2. A new screen will display for the users to specify the criteria based on the data fields and choose which data fields to display.

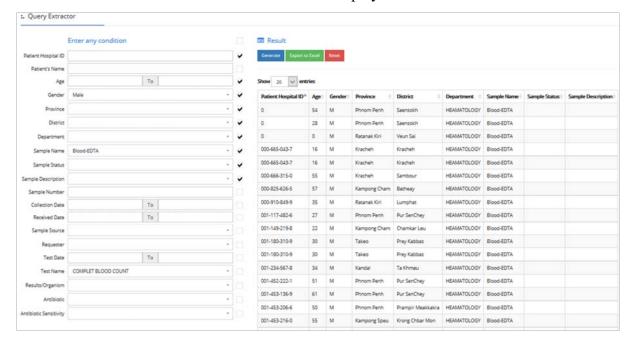

- 3. After all criteria has been selected, click on button "Generate". All matching data will be displayed as the above picture by showing the total record number at the bottom. Click on the number of pages to display other pages.
- 4. Click on button "Export to Excel" to export thedata to MS Excel.
- 5. Click on button "**Reset**" to clear all criteria and outputs.